

ultrammat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER
NOPEA KAPSELISEKOITIN
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
高速アマルガムミキサー
高速銀汞調拌机



S significa ¡simple!

ultramats



Amalgamador de alta velocidad


- Trituración exacta y consistente
- Baja vibración y extremadamente silencioso
- Simple de usar – solo dispone de 3 botones
- Adecuado para todas sus cápsulas
- Fácil de limpiar
- Indicador de bajo consumo de energía y función de apagado
- Voltaje dual



ultrammat S características:


Es tan simple de usar, solo dispone de 3 botones

Hay tres opciones para ajustar el tiempo, 6, 8 y 10 segundos que permiten mezclar todos sus materiales encapsulados. La unidad puede detenerse en cualquier momento presionando estos botones durante su operación o solamente al levantar la tapa.

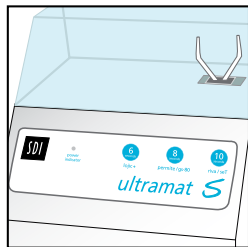

¡Tan fácil de limpiar!

La higiénica superficie lisa de la cubierta facilita la limpieza para el control de infecciones. La superficie plástica no porosa puede limpiarse con cualquier desinfectante dental.

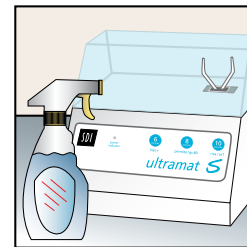


Trituración exacta y consistente

Ultramat S incluye un cronómetro oscilante controlado por un microprocesador para lograr una trituración exacta y consistente.




Voltaje dual

Ultramat S opera con voltajes entre 100-120 y 220-240V, 50 y 60Hz. Es compatible con múltiples voltajes y frecuencias de energía.

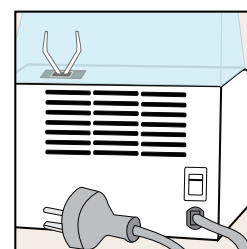


Baja vibración y extremadamente silencioso

A diferencia de algunos amalgamadores, Ultramat S tiene un dispositivo de baja producción de ruido. La vibración mínima de todas sus partes externas garantiza que no se moverá de posición.

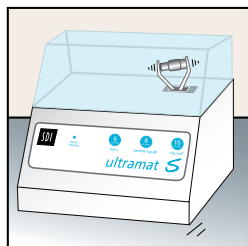


Indicador de bajo consumo de energía y función de apagado

Si el suministro de energía cae fuera de los rangos requeridos de 100-120V y 220-240V, el indicador de energía destellará en color azul y la unidad no funcionará hasta que se suministre el adecuado rango de energía. Este evita que los materiales se mezclen inadecuadamente.

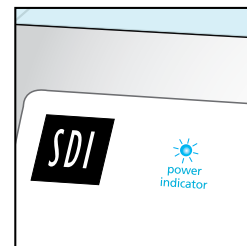


Adecuado para todas sus cápsulas

La horquilla flexible puede ajustarse a un sin número de cápsulas con extremos redondos (cápsulas de amalgama), y también a las que tienen boquillas salientes (cápsulas con cemento de ionómero de vidrio).

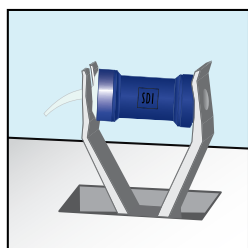


Característica de seguridad

Cuando se abra la tapa transparente, Ultramat S detendrá inmediatamente la mezcla de materiales.

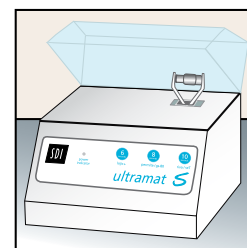

Alto rendimiento de energía y baja entrada de energía

Posee una frecuencia de mezcla de 4550 oscilaciones por minuto (+/- 1%). Ultramat S garantiza la mezcla completa de cualquier material dental. Sin embargo, produce un consumo de energía relativamente bajo.

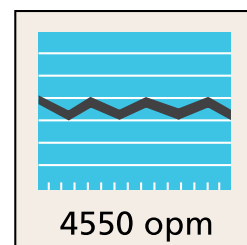

ultramats



Dimensiones:

ancho	profundidad	altura
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

Voltaje:

100 - 120 voltios
220 - 240 voltios
50 - 60 Hz

Peso:


2.43kg
5.4lbs

Ultramat S

(Para todos los países – incluye un cable eléctrico adecuado a la región a donde se envía el producto)
Código de pedido 5546058



Hecho en Australia por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 2255 734
Brasil 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Alemania 0800 100 5759
Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nueva Zelanda 0800 734 034
España 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
USA & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

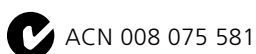

M554654 B

+D036M5546541A