



perfecta 300/600



perfecta 300/600

El mundo de Perfecta

La fantasía sin límites resulta esencial para su trabajo. A diario, tiene que desarrollar e implementar visiones creativas. Nuestros ingenieros se han centrado en la implementación de sus ideas más atrevidas y han desarrollado la mejor herramienta de laboratorio para usted. ¡La nueva Perfecta ya está aquí!

Trabajo ameno

Sólo entonces se realizará bien. El primer paso para ello es un motor para laboratorio que resulte sencillo de manejar, que sea de aplicación universal y que disponga de características innovadoras (como el mando independiente de la unidad de control). Perfecta 300 y 600 cuentan con una tecnología totalmente nueva resultando idóneas para el tratamiento de todos los materiales convencionales.

Trabajo sin esfuerzo

Materiales diversos, exigencias elevadas y requisitos previos en constante cambio, son el día a día de los técnicos dentales. Con Perfecta tendrá a mano una unidad de laboratorio potente y con una amplia gama de aplicaciones. Con ella podrá hacer realidad, sin ningún esfuerzo, tanto sus expectativas como las de sus clientes.

Innovador y ergonómico

A lo largo del día, se realiza mil veces el mismo movimiento. Se efectúan los mismos trabajos una y otra vez. Es en estos casos cuando se demuestra si una unidad de trabajo tiene un diseño ergonómico y si sus funciones se han estudiado para que permitan ahorrar breves unidades de tiempo de forma constante. Los equipos de laboratorio Perfecta hacen que sea posible trabajar de forma económica y ergonómica. Trabajo tras trabajo, día tras día.



Fácil de manejar

¡Es genial! El mando de control externo se coloca, como siempre, en el puesto de trabajo. Se utiliza como unidad de control central. Fácil, claro y sencillo.

Concepto sensacional: diseño modular.

Perfecta se compone de tres módulos principales: la pieza de mano, la consola y el mando de control independiente. En este último se efectúan todos los ajustes (Por ejemplo: se puede activar el giro hacia la izquierda). En la pantalla siempre se visualizarán funciones, los parámetros y el número de revoluciones con el que se está trabajando en ese momento. Con ello se ahorra espacio y se obtiene un plus en seguridad y comodidad.

Ahorre tiempo con los programas automáticos

En el »modo biestable«, cada vez que arranque el motor se alcanzará el número de revoluciones seleccionado. Para iniciar o detener el motor basta con pulsar el pedal, la palanca o la tapa. En el modo »cruise control«(control de velocidad) de Perfecta 600, el número de revoluciones ajustado se almacenará una vez transcurridos dos segundos y se mantendrá automáticamente. Podrá trabajar con libertad y de forma relajada, lo que le permitirá concentrarse por completo en la pieza en la que se esté trabajando. Ambos programas se pueden controlar a través del mando de control independiente.





Potencia completa, control total

Perfecta, un motor para laboratorio que puede con todo. Su fuerte potencia le permitirá trabajar de forma insuperable. No importa si realiza un trabajo a plena potencia o un procedimiento delicado, con esta variedad de posibilidades estará preparado para cualquier trabajo.

Novedad mundial: Aire comprimido integrado en la pieza de mano

¡Nunca antes se había visto algo así! Atrás queda el constante cambio entre pieza de mano y pistola de aire. En el modelo Perfecta (600) la pistola de aire está integrada en la pieza de mano. Siempre está lista para su uso, sólo tiene que pulsar un botón o una palanca. Así podrá trabajar con mayor rapidez y, sobre todo, con mayor efectividad.

También resulta útil el efecto de limpieza que se obtiene mediante el aire comprimido. Los posibles restos de partículas de material que quedan en la zona delantera de la pinza de sujeción son eliminados fácilmente.

Alta potencia aplicable con exactitud

Potencia total cuando lo desee. Con Perfecta tendrá a su disposición una amplia gama de potencias. Dispondrá de potencia absoluta cuando sea necesario y de una aplicación de fuerza delicada para los trabajos más minuciosos. A través de la pantalla

del mando de control independiente, siempre estará informado del número de revoluciones correspondiente y podrá estar seguro de lograr una potencia excepcional al mismo tiempo que cuida la fresa y la.

... y otras características excepcionales

Es muy importante mantener una baja temperatura. Esto no supone un problema para Perfecta, ya que a pleno rendimiento, la pieza de mano apenas se calienta. Además, Perfecta cuenta con una suavidad de giro excepcional (esencial para trabajar con precisión) y con nivel sonoro muy reducido. Esto último se valora mucho al final de un día de trabajo.



Cosas que hacen la vida más sencilla

W&H pone a su disposición una amplia gama de accesorios para que el trabajo con Perfecta resulte más cómodo y sencillo.

A la vista

El mando de control independiente de la unidad de mando se puede colocar en cualquier lugar, incluso a la altura de los ojos. Gracias al dispositivo de suspensión, no es necesario colocarlo sobre la mesa de trabajo. Además, se puede ajustar en diversas direcciones y se puede instalar según sus necesidades.

Siempre recogido

El práctico juego de herramientas y de limpieza se coloca en el soporte para la pieza de mano y, de este modo, siempre está accesible.

Motor eléctrico opcional

También puede recibir el modelo Perfecta 300 en la variante de motor eléctrico con conexión ISO para todos los trabajos sencillos. Es apto para piezas de mano técnicas y para todas las piezas de mano y contra-ángulos de cualquier fabricante.

Extraordinariamente duradero

Su técnica perfeccionada proporciona una enorme ventaja: funciona sin problemas durante muchos años. Este también es el caso de los motores de inducción de Perfecta que no necesitan mantenimiento. Aquí es donde nuestros años de experiencia, en el desarrollo de este tipo de motores, nos hacen diferentes. Por eso, ofrecemos 24 meses de garantía.



Las personas son lo importante

Dependiendo de sus necesidades, usted puede trabajar de diferentes formas. ! Perfecta lo tiene en cuenta;

Configure su puesto de trabajo

Los motores para laboratorio Perfecta están disponibles en varios modelos. Configure su puesto de trabajo como desee; ya sea con un modelo de rodilla, de mesa o de pie.

Perfecta como modelo de mesa

La unidad está compuesta por el mando de control independiente, la consola que se puede colocar donde se desee (incluso bajo la mesa o detrás de ella), el pedal con la tecla adicional para la función del aire comprimido (Perfecta 600) y la pieza de mano técnica.

Perfecta como modelo de rodilla

La unidad está compuesta por el mando de control independiente, la consola colocada bajo la mesa con palanca para la función del aire comprimido (Perfecta 600) y la pieza de mano técnica. De forma opcional, el modelo de rodilla se puede equipar con un pedal.

Perfecta como modelo de pie

La unidad está compuesta por la consola con la tecla adicional para la función del aire comprimido (Perfecta 600) y la pieza de mano técnica. De forma opcional, el modelo de pie se puede equipar con un mando de control independiente.





Modelo de mesa

- 1 Pieza de mano
- 2 Consola
- 5 Pedal
- 6 Mando de control independiente

Modelo de rodilla

- 1 Pieza de mano
- 3 Consola
- 6 Mando de control independiente

Modelo de pie

- 1 Pieza de mano
- 4 Consola
- 6 Opcional: Mando de control independiente




Opcional en Perfecta 300:

7 Motor eléctrico con conexión ISO

Datos técnicos

	Perfecta 300	Perfecta 600
Número de revoluciones mín.	1.000 rpm	1.000 rpm
Número de revoluciones máx.	40.000 rpm	50.000 rpm
Torque	5,5 Ncm	7,8 Ncm
Función de aire comprimido	No	Sí
Modos automáticos	Biestable	Biestable y Control de velocidad
Giro hacia la derecha / izquierda	Sí	Sí
Arranque suave / Parada inmediata	Sí	Sí
Conexión de aire a presión	No	Sí, 6 bares
Pieza de mano / eléctrica	Sí / Sí, opcional	Sí / No
Pieza de mano de motor	Sin escobillas	Sin escobillas
Mando de control independiente	Sí, opcional con el modelo de pie	Sí, opcional con el modelo de pie
Herramientas en el soporte para la pieza de mano	Sí	Sí
Garantía	24 meses	24 meses
Medidas de la pieza de mano (l / d)	138 mm / Ø 27 mm	138 mm / Ø 27 mm
Instrumento rotatorio	Ø 2,35 mm o 3 mm según EN ISO 1797-1:1995	Ø 2,35 mm o 3 mm según EN ISO 1797-1:1995
Precisión de concentricidad	< 0,02 mm	< 0,02 mm
Potencia eléctrica	160 W	200 W
Conformidad con RoHS	Sí	Sí
Peso modelo de mesa / rodilla / pie	4,0 kg / 3,7 kg / 2,5 kg	5,0 kg / 4,7 kg / 3,5 kg
Nivel sonoro	< 55 dBA	< 55 dBA

Perfecta en su puesto de trabajo

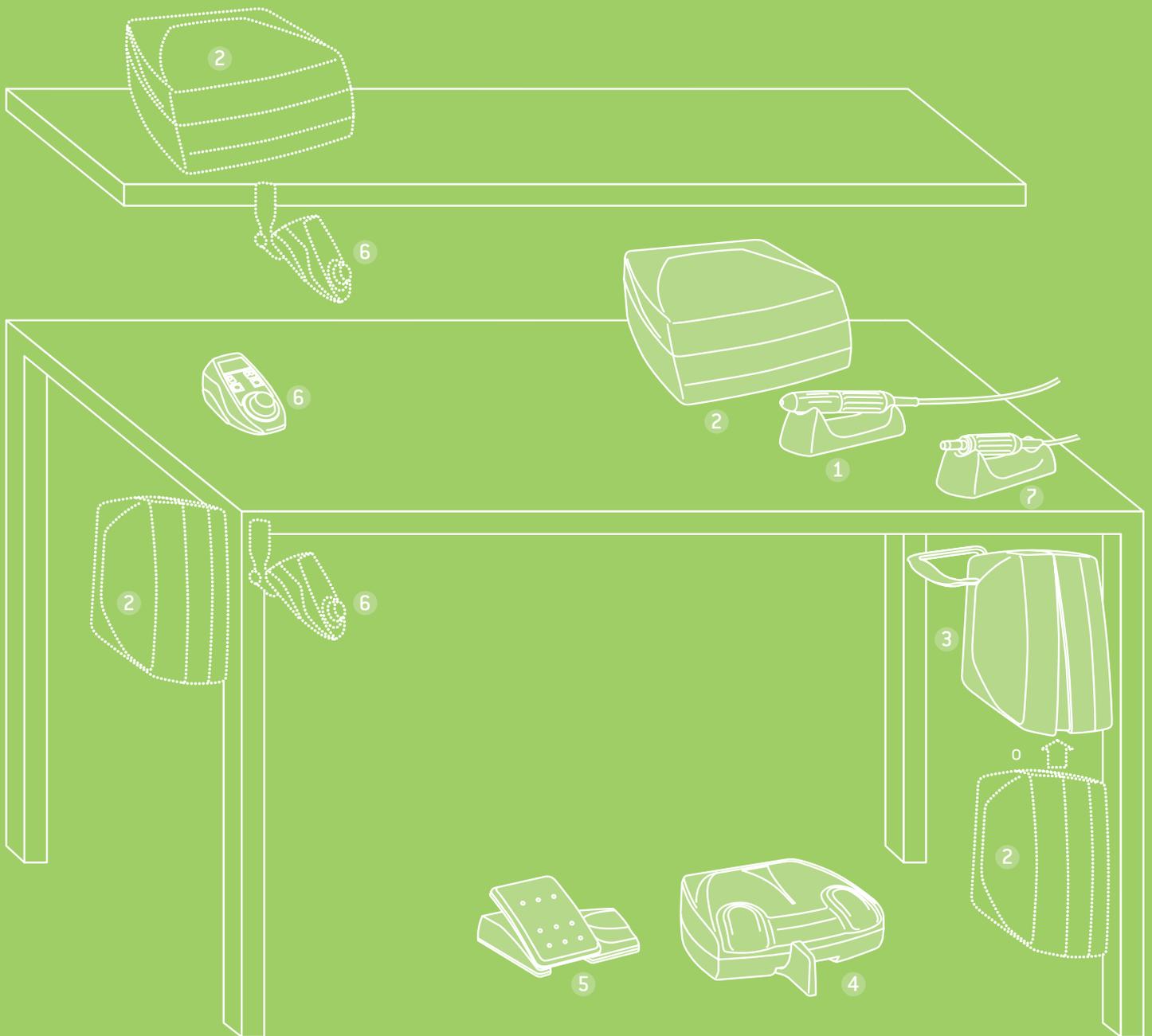

- 1 Pieza de mano
- 2 Modelo de mesa
- 3 Modelo de rodilla
- 4 Modelo de pie

- 5 Pedal
- 6 Mando de control independiente
- 7 Motor eléctrico con conexión ISO
[opcional en Perfecta 300]

Wehadent Ibérica S.L.
C/ Ciudad de Melilla, 3, Bajo
E-46017 Valencia, España

t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
e oficinas.es@wh.com
wh.com

Pida su Perfecta a través
de su distribuidor especializado.



Las imágenes de las ilustraciones son orientativas.
El suministro original no incluye ni los
complementos ni los accesorios aquí mostrados.